


一次性套管穿刺器（套管穿刺针）骨科专用

- 用于肩关节手术中。
- 螺旋齿形，防止滑脱。
- 向关节部位循环灌注生理盐水用于扩张手术部位并形成一定空间，循环的液体能带走手术血块，保持清晰手术视野。

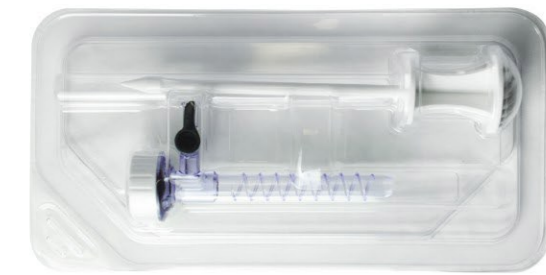

骨科穿刺器尺寸表

规格	内径D	长度L	备注
Φ6×100	Φ6.6	100	白色
Φ8×100	Φ8.6	100	紫色
Φ6×120	Φ6.6	118	黄色
Φ8×120	Φ8.6	118	绿色

骨科穿刺器常用配置表

型号	规格	配置内容	编号	备注
VI型	Φ6×100	1支Φ6×100穿刺套管+1支Φ6×100穿刺针	101Y.550	6mm单支
	Φ8×100	1支Φ8×100穿刺套管+1支Φ8×100穿刺针	101Y.552	8mm单支
	Φ6×120	1支Φ6×120穿刺套管+1支Φ6×120穿刺针	101Y.551	6mm单支
	Φ8×120	1支Φ8×120穿刺套管+1支Φ8×120穿刺针	101Y.553	8mm单支

一次性套管穿刺器（套管穿刺针）甲状腺手术专用

- 与常用的腹腔镜穿刺器不同在于套管尾部体积较小，在进行腔镜甲状腺手术时，套管间不易干涉。
- 套管外表的齿形为螺旋线形，在插入、拔出穿刺器时，可通过旋转套管来辅助进行，固定可靠。
- 穿刺针头为钝性圆锥形，在穿刺时，可起到钝性分离作用。
- 穿刺针与套管设有防转凸台，穿刺时，方便穿刺器旋转插入。



取物袋(微小号135×60)

甲状腺穿刺器尺寸表

规格	内径D	长度L
Φ5JL	Φ6	160
Φ10JL	Φ11	160

甲状腺穿刺器常用配置表

型号	规格	配置内容	编号	备注
II型	Φ5JL	1支Φ5JL穿刺套管+1支Φ5JL穿刺针	101Y.530	5mm单支
	Φ10JL	1支Φ10JL穿刺套管+1支Φ10JL穿刺针	101Y.531	10mm单支
III型	套装H1	2支Φ5JL、2支Φ10JL穿刺套管+Φ5JL、Φ10JL穿刺针各1支+标本袋	101Y.218A	
IV型	套装H2	2支Φ5JL、1支Φ10JL穿刺套管+Φ5JL、Φ10JL穿刺针各1支+标本袋	101Y.218B	
V型	套装H3	3支Φ5JL、1支Φ10JL穿刺套管+Φ5JL、Φ10JL穿刺针各1支+标本袋	101Y.218C	
VI型	套装H4	1支Φ5JL、2支Φ10JL穿刺套管+Φ5JL、Φ10JL穿刺针各1支+标本袋	101Y.218D	

一次性套管穿刺器（套管穿刺针）胸腔专用

一次性套管穿刺器（套管穿刺针）胸腔专用优点:

- 套管上带有螺纹设计，有效增加穿刺器套管与胸腔间的摩擦力，避免穿刺器套管脱落。
- 独特的穿刺钝头设计，有效避免刺伤脏器，保证手术安全性。
- 使用医用高分子材料，质地轻盈，操作便捷。
- 可拆卸式设计，方便术中取标本。
- 一次性使用，杜绝交叉感染。

■ 独特穿刺钝头设计
避免刺伤脏器

■ 螺纹管身，防止滑脱

■ 可拆卸式密封帽

订货编号	101Y.510	101Y.512	101Y.513
规格型号	Φ6×65	Φ10×65	Φ12×65



一次性套管穿刺器（套管穿刺针）




免用转换器，取物更方便
一次性套管穿刺器（套管穿刺针）规格

规格	内容	备注
Φ3	1支Φ3穿刺套管+1支Φ3穿刺针	
Φ5	1支Φ5穿刺套管+1支Φ5穿刺针	
Φ10	1支Φ10穿刺套管+1支Φ10穿刺针	
Φ12	1支Φ12穿刺套管+1支Φ12穿刺针	
套装A	Φ5、Φ10穿刺套管各2支+Φ5、Φ10穿刺针各1支+气腹针+标本袋	
套装B	2支Φ5、1支Φ10穿刺套管+Φ5、Φ10穿刺针各1支+气腹针+标本袋	
套装C	3支Φ5、1支Φ10穿刺套管+Φ5、Φ10穿刺针各1支+气腹针+标本袋	
套装E	1支Φ5、2支Φ10穿刺套管+Φ5、Φ10穿刺针各1支+气腹针+标本袋	
套装F	2支Φ5、2支Φ12穿刺套管+Φ5、Φ12穿刺针各1支+气腹针+标本袋	
套装J	2支Φ5、1支Φ10、1支Φ12穿刺套管+Φ5、Φ10、Φ12穿刺针各1支+气腹针+标本袋	
套装H	2支Φ5L、2支Φ10L穿刺套管+Φ5L、Φ10L穿刺针各1支+气腹针+标本袋	肥胖病人专用
套装H1	2支Φ5JL、2支Φ10JL穿刺套管+Φ5JL、Φ10JL穿刺针各1支+标本袋	甲状腺病人专用

了解其它包装规格信息请与我司联系！



一次性套管穿刺器（套管穿刺针）球囊型

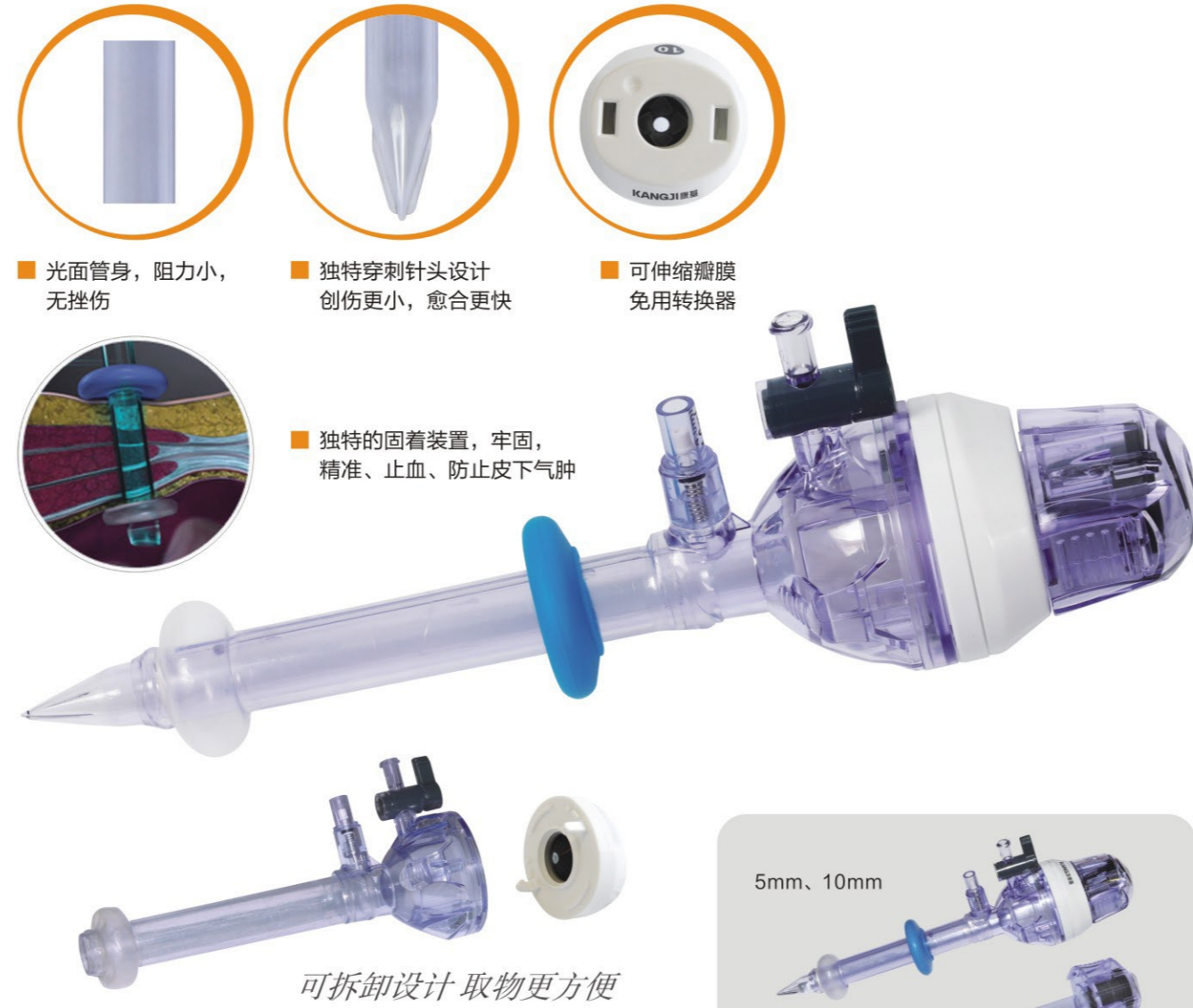

免用转换器，取物更方便
一次性套管穿刺器（套管穿刺针）球囊型规格

规格	内容	备注
Φ5	1支Φ5穿刺套管+1支Φ5穿刺针	
Φ10	1支Φ10穿刺套管+1支Φ10穿刺针	
Φ12	1支Φ12穿刺套管+1支Φ12穿刺针	
套装A	Φ5、Φ10穿刺套管各2支+Φ5、Φ10穿刺针各1支+气腹针+标本袋	
套装B	2支Φ5、1支Φ10穿刺套管+Φ5、Φ10穿刺针各1支+气腹针+标本袋	
套装F	2支Φ5、2支Φ12穿刺套管+Φ5、Φ12穿刺针各1支+气腹针+标本袋	
套装J	2支Φ5、1支Φ10、1支Φ12穿刺套管+Φ5、Φ10、Φ12穿刺针各1支+气腹针+标本袋	

了解其它包装规格信息请与我司联系！



一次性套管穿刺器（套管穿刺针）小儿专用



穿刺器常用配置


规格	配置内容
套装X	1支Φ3套管、1支Φ5套管+1支Φ3针、1支Φ5S针+1支气腹针
套装Y	2支Φ3套管、1支Φ5套管+1支Φ3针、1支Φ5S针+1支气腹针
套装Z	3支Φ3套管、1支Φ5套管+1支Φ3针、1支Φ5S针+1支气腹针
套装Z1	2支Φ3套管、2支Φ5套管+1支Φ3针、1支Φ5S针+1支气腹针
套装Z2	3支Φ5套管+1支Φ5S针+1支气腹针

单位:mm

规格	配置内容
Φ3	1支Φ3穿刺套管+1支Φ3穿刺针
Φ5S	1支Φ5S穿刺套管+1支Φ5S穿刺针

一次性套管穿刺器（套管穿刺针）球囊型优点：


- 可在0° 镜引导下实现可视穿刺，避免盲穿造成的损伤。
- 带有免转换多重密封系统，在使用不同规格手术器械时无需使用转换器，提高手术效率。
- 可拆卸式设计，方便术中取标本。
- 套管上带有螺纹设计，有效增加穿刺器套管与腹壁间的摩擦力，避免穿刺器套管脱落。
- 独特的“元宝形”穿刺刀头设计，在保证穿刺锋利的前提下，最大限度的避免切割组织，减少创伤，利于创口愈合。
- 使用医用高分子材料，质地轻盈，操作便捷。
- 一次性使用，杜绝交叉感染。

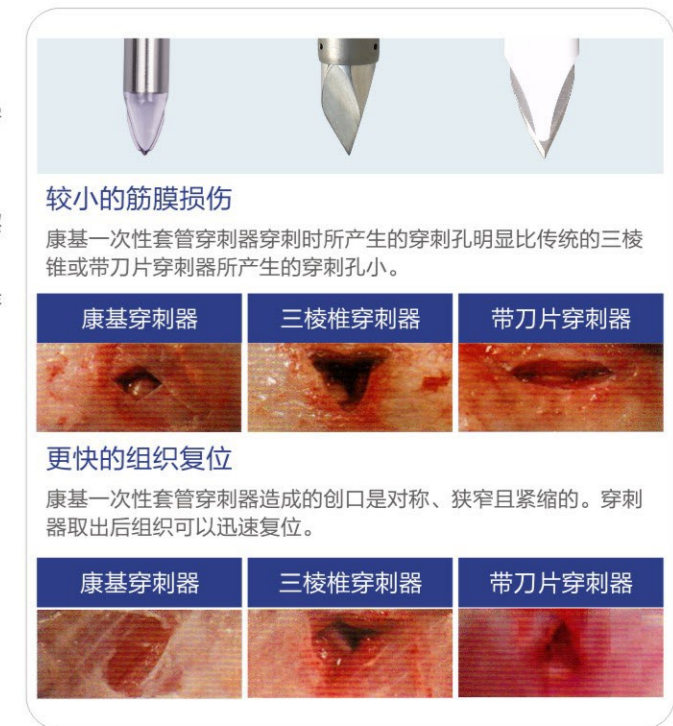

重复使用的金属穿刺器需要这样
才能彻底清洗干净，
你做到了吗？



重复使用的金属穿刺器的实际成本包含这些，
你发现了吗？

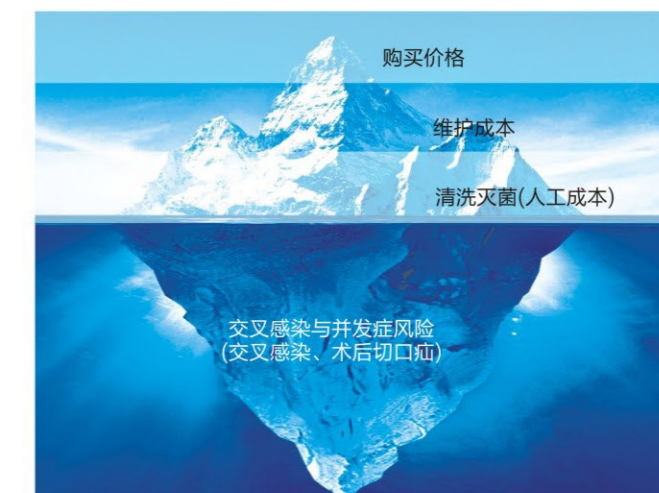

一次性套管穿刺器（套管穿刺针）球囊型的临床优势

- ✓ 保证穿刺针的锐利度，避免重复性使用穿刺器反复使用、清洗消毒后造成的刃口锐利度下降。
- ✓ 保证每个产品都具有良好的密封性能，避免重复性使用穿刺器多次清洗、消毒后造成的密封性能下降。
- ✓ 单病人使用，避免交叉污染和交叉感染
- ✓ 免去重复使用穿刺器繁琐而高风险的清洗、消毒工作，减少医院的人力支出
- ✓ 使用方便，减少误操作和不必要的损伤
- ✓ 降低穿刺孔疝、误刺等并发症的发生率